


96孔智能氮吹仪

biocomma®96孔智能氮吹仪专为96孔板快速无氧浓缩设计，
该装置可将加热的氮气吹扫到加热样品表面，
使样品中溶剂更快蒸发，提高实验效率。

- 气针相互独立，可拆卸，清洗更方便；
- 升降旋钮在前端，设计更人性化；
- 触屏操作，使用更便捷；
- 可编程序，操作更智能；
- 气流、温度可编辑，控制更精准；
- 氮气、底板均可加热，氮吹效率更高。

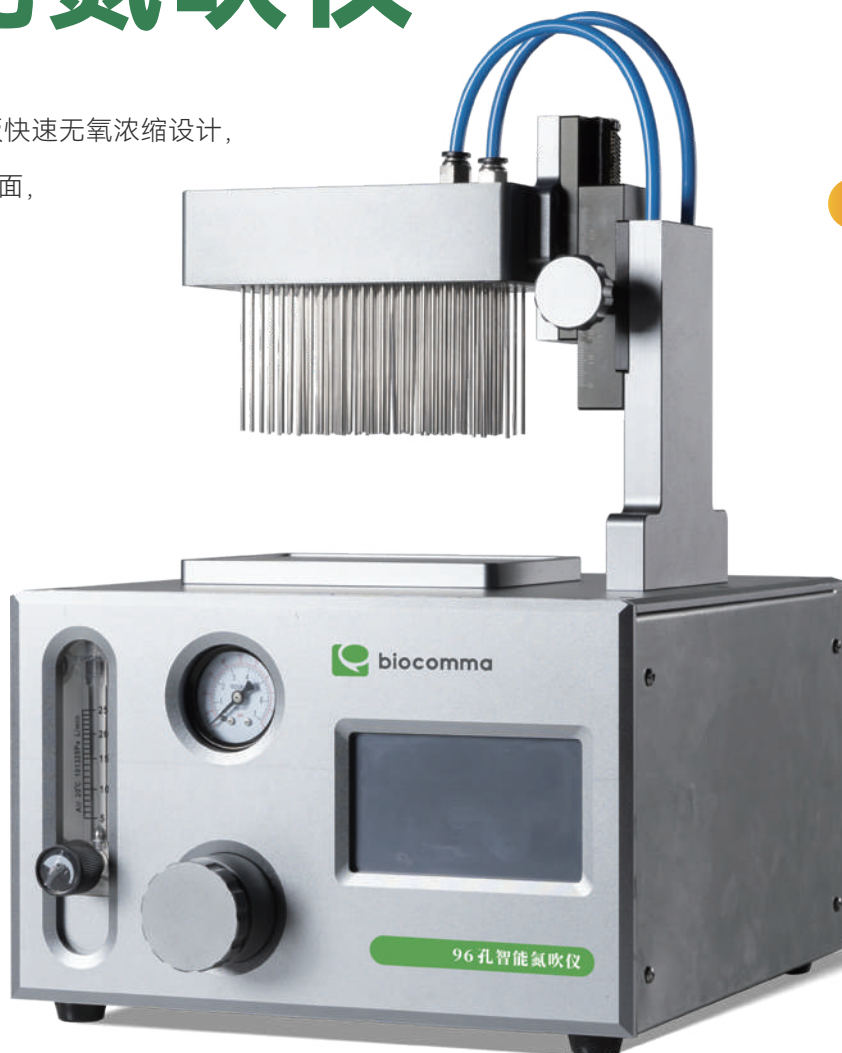

货号

BCN9603

描述

biocomma®96孔智能氮吹仪


包装

1台/箱

96孔氮吹仪

biocomma®96 孔氮吹仪是一款结合微电脑处理和 PID 控制方式的氮气浓缩装备，其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面，根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点设定加热温度，从而实现大量样品的快速无氧浓缩，提高目标物分析物的回收率与重现性。

- 气针相互独立，不会引起交叉污染；
- 气腔高度可以调节，标准气针长度为 80mm；
- 各吹管通道可组合使用或单独使用；
- 每个气针和模块孔位垂直对应，调整直观、方便；
- 系统控温精度高、范围广，方便校准；
- 升降机构有保护装置，使用更安心；
- 升降机构带刻度显示，定位准确；
- 传热性能佳、传热均匀；

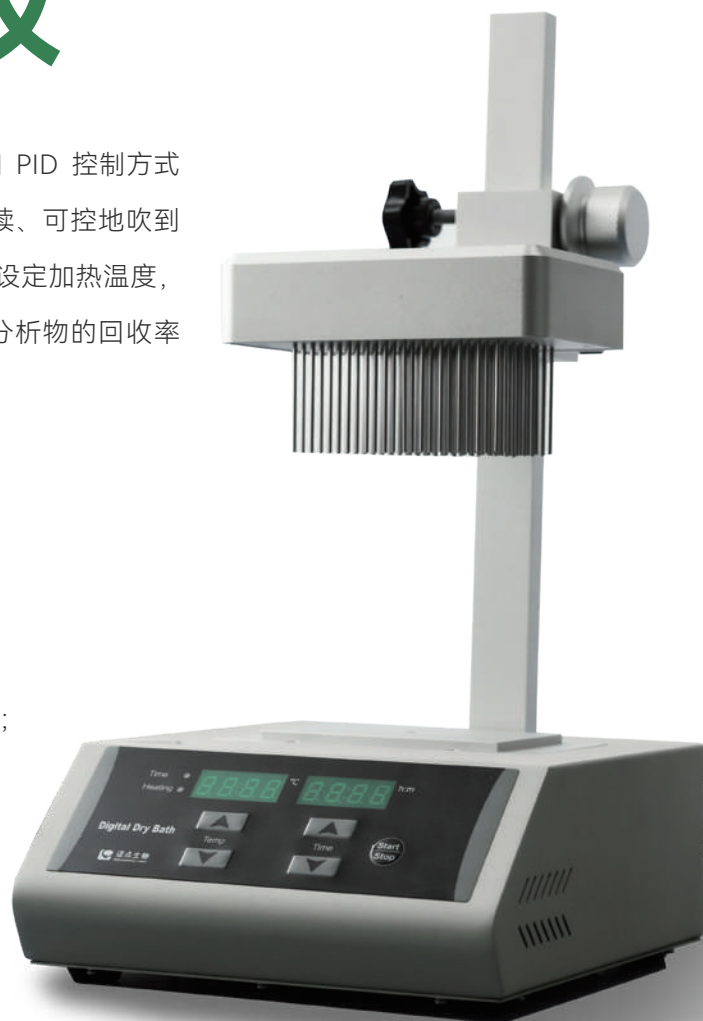

货号

BCN9602

描述

biocomma®96孔氮吹仪

包装

1台/箱