


DC15H

自动拧盖仪

可适配15ml离心管和市面上大部分的保存管，感应触发完成开关盖操作；
10分钟完成96个样本的开盖关盖、样本的手动分装。

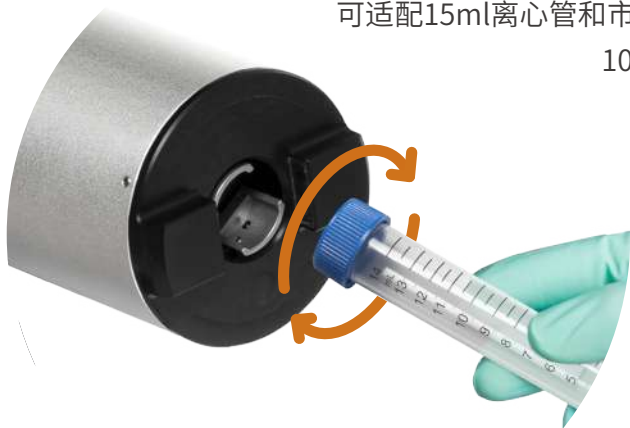

多功能

可兼容15ml离心管+多种规格的保存管
可开盖直径18mm~24mm

智能化

红外传感器实时判断离心管位置
自动记录操作数量，可调节开盖速度
开关盖、仅开盖、仅关盖三种工作模式可自由切换

高效

可单手操作开关盖
开关盖一次仅需3秒

便携

体积仅18*22*50cm
可以在生物安全柜中放置2台



货号	描述	包装
BM-DC15H	DC15H自动拧盖仪	1台/箱

